

Bedienungsanleitung für *LEDental Loupe 6,0-fach*


1. Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung sorgfältig durch und betreiben Sie das Gerät korrekt.

Diese Hinweissymbole ermöglichen Ihnen die sichere Anwendung dieses Produkts und vermeiden Gefahren und Schäden für Sie und andere. Sie sind nach Ausmaß und Schwere der Gefährdung oder Schädigung eingestuft. Alle Hinweise und Symbole betreffen die Sicherheit und müssen beachtet werden.



Dieses Zeichen warnt vor einer extrem gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Gefahrenhinweises zu Tod oder schwerer irreversibler Verletzung führen wird.

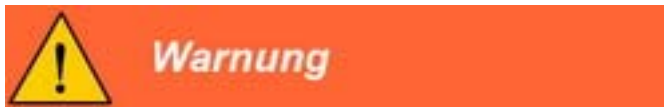

Dieses Zeichen warnt vor einer gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Gefahrenhinweises zu Tod oder schwerer irreversibler Verletzung führen kann.



Dieses Zeichen warnt vor einer gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Gefahrenhinweises zu leichter reversibler Verletzung führen kann.



Dieses Zeichen warnt vor Situationen, bei der die Nichtbeachtung des Hinweises zu Beschädigungen des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen kann.


2. Justierung

Mit zwei Schrauben (1) wird die Lupe am Headband, Double Frame oder am Sporty Frame befestigt.

Mit dem Doppelgelenk (2) können die Optiken optimal zu den Augen justiert werden.

Zum Einstellen des Pupillenabstandes können die beiden Optiken separat verschoben werden. Dazu sind die Justierschrauben (3) erst zu lösen. Nach der Einstellung müssen diese wieder fixiert werden.

Das PowerLight spot wird mit Hilfe des Metallclips (4) am Gestell befestigt. Dazu ist die kleine Schraube (5) so weit zu lösen, dass der Clip auf das Gestell gleiten kann. Anschließend wird die Schraube wieder festgezogen.

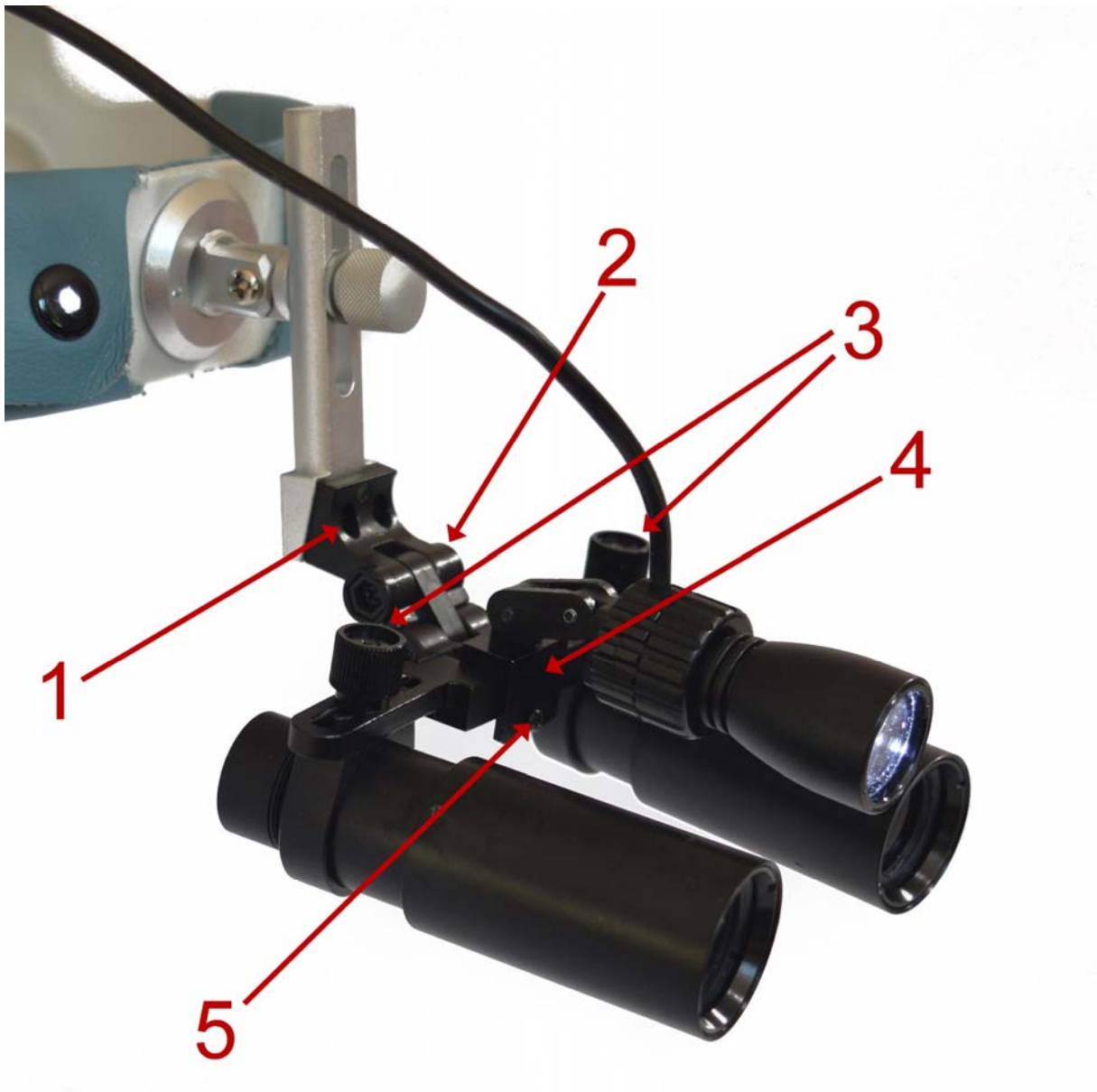

3. Technische Daten

LEDental Loupe 6,0x

Vergrößerungsfaktor: 6,0

Gewicht: 85 g

Arbeitsabstand:

6,0x-S: 410 mm

6,0x-R: 490 mm

Durchmesser Sichtfeld:

6,0x-S: 55 mm

6,0x-R: 58 mm

LEDental GmbH
Mahlower Straße 28
15806 Zossen
☎ (03377) 20 41 39
Fax (03377) 200 79 65
mail@ledental.de
www.ledental.de

